

# Line.Vu

## Analyseur professionnel de la peau du visage


LineVu, le premier analyseur de peau LED au monde doté de quatre sources de lumière distinctes, fournit des images haute résolution et une analyse approfondie.



Caméra supplémentaire pour l'évaluation des rides du cou

## TRAITEMENT LASER VIRTUELLE

Le traitement laser virtuel permet de montrer à vos clients les résultats attendus du traitement de pigmentation et leur permet de mieux comprendre la procédure.

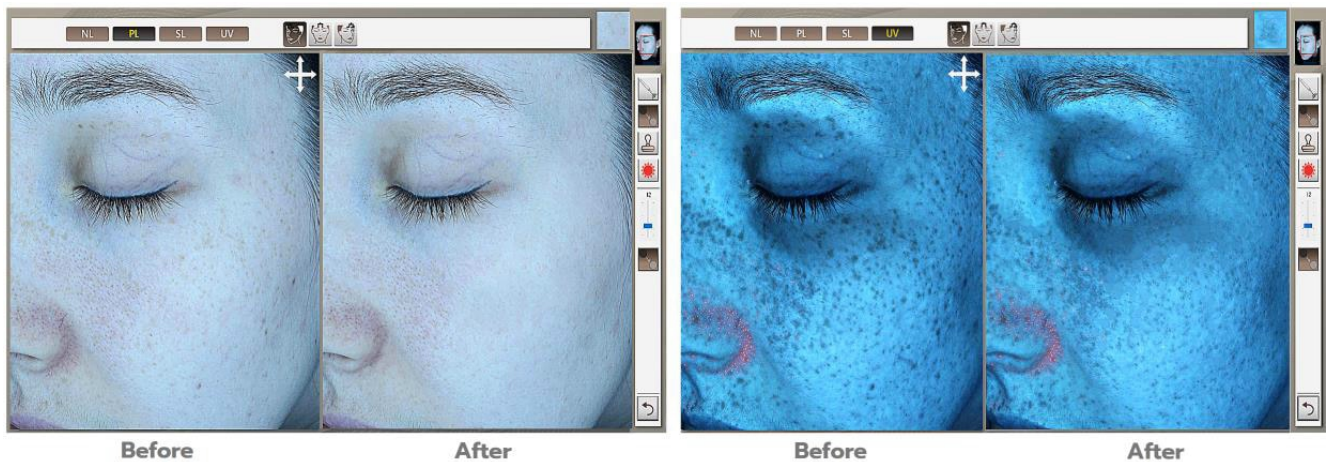



## FONCTIONNALITÉ DE VISIONNEUR EFFICACE

Les clients peuvent voir comment la pigmentation, les rides et même les rides cachées peuvent apparaître sans traitement. Consultez notre « Mode simulation » pour une communication efficace



**Lavisionneuse 3D** fournit des visuels sous différentes dimensions et angles pour évaluer la profondeur et la taille des pores, des rides et de la texture de la peau.

**Smart Viewer** est pratique lors de la visualisation des données du client à distance. Utilisez des tablettes PC pour naviguer facilement. Comment analyser les images et les données avec notre service d'interfonctionnement.

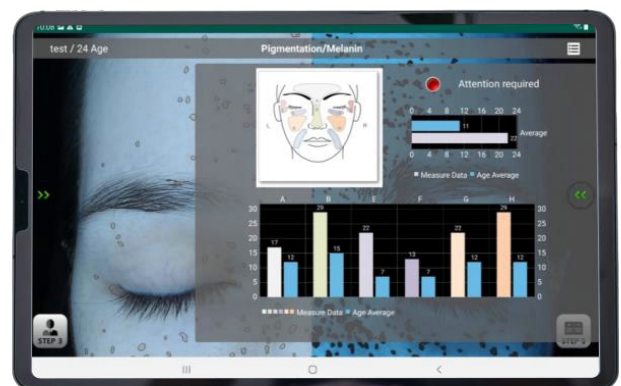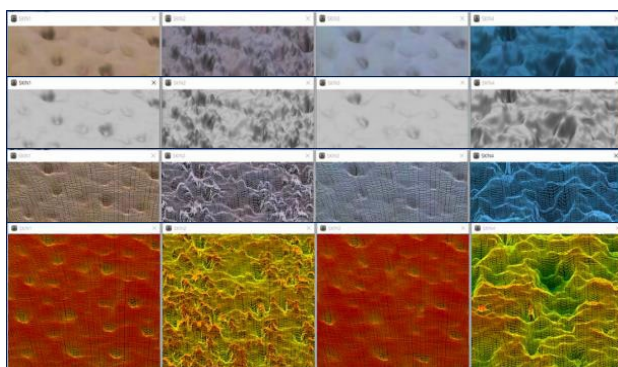



## SOURCES LUMINEUSES

LineVu dispose de sources lumineuses entièrement LED. Observez des images avant et après précises et proposez des consultations personnalisées à vos clients



### Normale

Pores  
Les rides  
Teint  
Cercles sombres



### Spéculaire

Rides cachées  
Texture de la peau  
Éclat



### Polarisé

Pigmentation  
Rougeur  
Taches brunes  
Tête noire



### UV

Melanin  
Sebum  
Porphyrin (P.Ance)



## VISIONNEUSE D'IMAGES

Les images peuvent être visualisées via diverses options de visualisation. Comparez facilement les images du client avec « Écran de superposition », « Mode Vue d'ensemble » et « Comparer par heure et sources de lumière »



## ANALYSE DE LA PEAU

LineVu propose quatorze modes d'analyse, notamment des vues récapitulatives et des analyses approfondies par problème de peau. L'analyse rouge et marron montre les conditions vasculaires et la pigmentation quelle que soit l'origine ethnique.

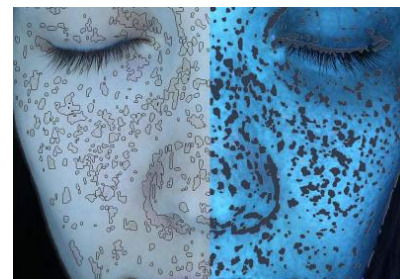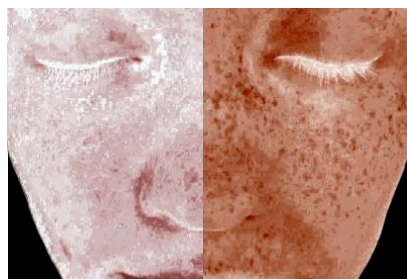

# RÉSULTATS

LineVu propose 14 modes d'analyse, notamment des vues récapitulatives et des analyses approfondies en fonction de divers problèmes de peau. LineVu peut être utilisé comme un puissant outil de consultation pour augmenter la satisfaction du client.



## Caractéristiques

Caméra	Caméra USB personnalisée	concentrer	Contrôle de mise au point fixe
Caméra cervicale	Caméra USB personnalisée	La puissance d'entrée	D.C 19 V 3,42 A.
Pixels	13,0 / 8,0 mégapixels	Taille poids	31,7(L)cm x 36,6(L)cm x 45,5(H)cm, 4,8Kg
Capteur d'image	1/3,2 CMOS	Angle de guidage frontal	Gauche : 37° Avant : 0° Droite : 37°



📍 Add: 1040 Rue du Lux, Suite 410, Brossard, Qc, J4Y 0E3

☎ Tel: +1450 639 1629

🌐 [www.medelink.ca](http://www.medelink.ca)

✉ [info@medelink.ca](mailto:info@medelink.ca)

